




Ganz genau.

# HORICO DENTAL






INNOVATIONS / NEUHEITEN

2023

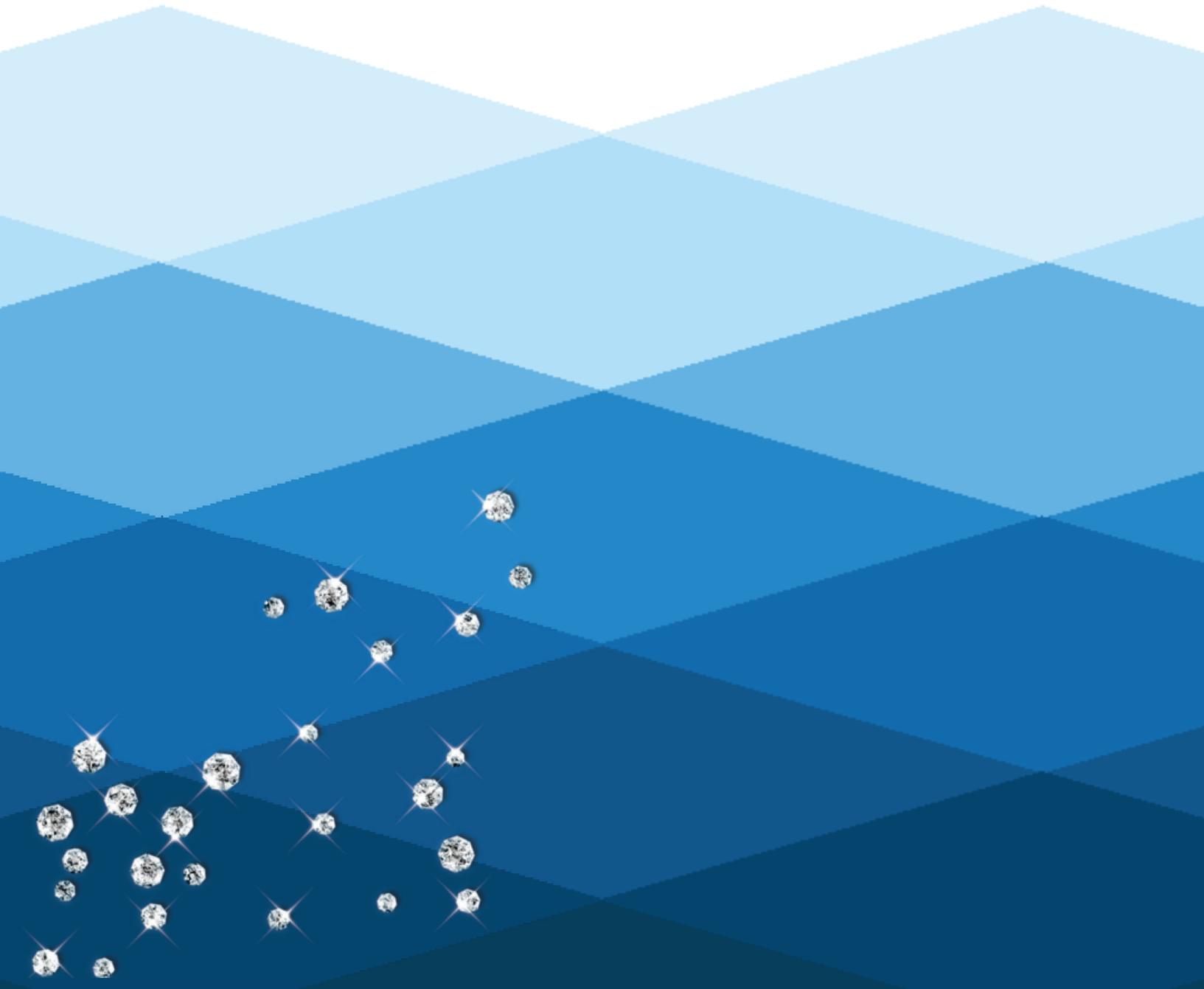

## KIT DEPTH MARKERS (KIT ASDM + ASDMM)

*Dr. A. Sommella*

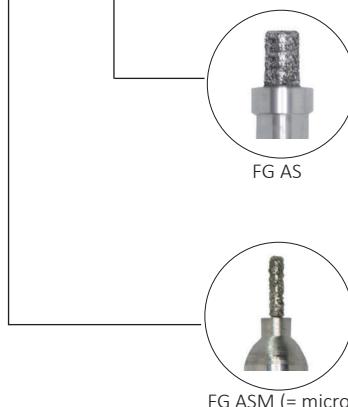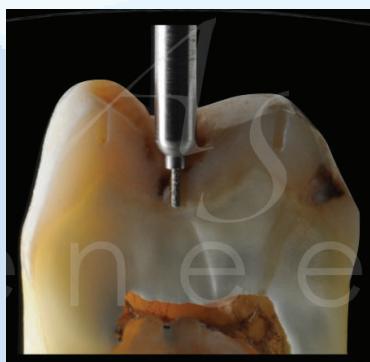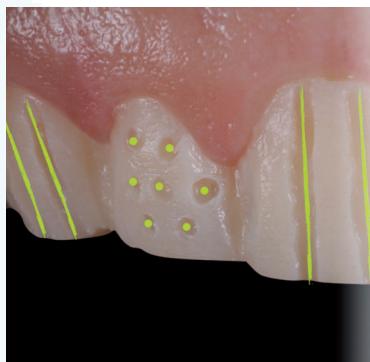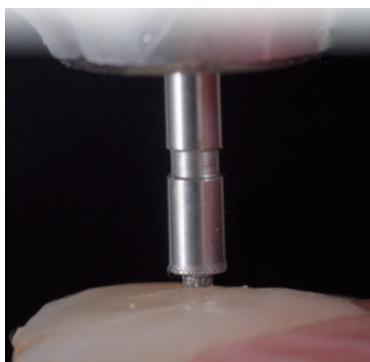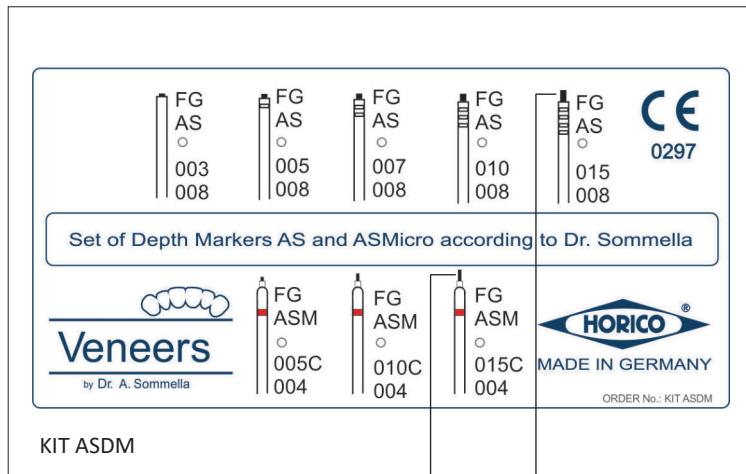

**DE** Die einzigartige Form der „AS“-Diamant-Tiefenmarkierer sorgt für eine streng definierte und gleichmässige Abtragstiefe.

**NEU:** FG ASM - Schleifer ermöglichen eine Tiefenmarkierung auch in besonders engen Bereichen und bei der Kronenpräparation.

**EN** The unique shape of the „AS“ diamond depth markers ensures a strictly defined and even removal depth.

**NEW:** FG ASM burs allow depth marking even in particularly narrow areas also for crown preparation.

**FR** La forme unique des fraises des marquage „AS“ garantit une profondeur de préparation strictement définie et régulière.

**NOUVEAU:** Les fraises FG ASM permettent un marquage en profondeur même dans les zones particulièrement étroites, également pour la préparation de couronnes.

**ES** La forma única de los marcadores de profundidad de diamante "AS" garantiza una profundidad de ablación controlada y uniforme.

**NUEVO:** Las fresas FG ASM permiten marcar en profundidad incluso en zonas especialmente estrechas, tambien para la preparación de coronas.



## DIAMANTSCHLEIFER

Diamond Burs • Fraise Diamantées • Fresas Diamantadas

### 141

881  
 ● 5881  
 ● 6881  
 ● 8881



L (mm)	8	8	8	8	8	8	881
FG 141 ... (806 314 141 524...)	010	012	014	016	018	025	
● FG 141 X ... (806 314 141 544...)			012	014	016		
● FG 141 G ... (806 314 141 534...)			012	014	016		NEW
● FG 141 C ... (806 314 141 514...)	010*	012	014	016			
FG Standard 1,6 mm	← 22 mm →						
Pack	5/1*	5	5	5	5	5	

opt. RPM: 100.000

<b>DE</b>	<b>Kronen und Brücken</b> Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen
<b>EN</b>	<b>Fixed prosthodontics</b> All ceramic and metal-ceramic crowns
<b>FR</b>	<b>Couronnes et bridges</b> Couronnes céramiques et céramo-métalliques
<b>ES</b>	<b>Coronas y puentes</b> Coronas de cerámica sin metal y de metal- cerámica



## ORALCHIRURGIE

Oral surgery • Chirurgie orale • Cirugía oral

### C162

L (mm)	10	11,5
C162 314 ... (500 314 408 297...)	016	
FG Standard 1,6 mm	← 19 mm →	
C162 204 ... (500 204 408 297...)	016	
W = RA = CA 2,35 mm	← 26 mm →	
C162 104 ... (500 104 408 297...)	016	023
H = HP = PM 2,35 mm	← 44,5 mm →	
Pack	1	1

opt. RPM: 25.000

<b>DE</b>	<b>Lindemann Knochenfräser</b> (chirurgischer Bohrer) für die schonende und effiziente Knochenbearbeitung. Jetzt auch im dickeren Durchmesser 023 verfügbar.
<b>EN</b>	<b>Lindemann bone cutter</b> (oral surgery) for gentle and precise trimming and preparation of hard tissue and bone structure. Now also available in bigger diameter 023.
<b>FR</b>	<b>Fraise à os Lindemann</b> (chirurgie orale) pour le découpage et la préparation doux et précis des tissus durs et de la structure osseuse. Maintenant aussi disponible en plus grand diamètre 023.
<b>ES</b>	<b>Fresa Lindemann</b> (cirugía oral) para el recorte y la preparación suave y precisa de tejidos duros y estructuras óseas. Ahora también disponible en diámetro 023.



**HOFLEX®**

gemischt, unmontiert • assorted, unmounted • assorti, non monté • surtido, no montado

Für Keramik, Komposite und Metalle • For ceramics, composites and metals

Pour céramique, composites et métaux • Para cerámica, composites y metales

**DE** Flexible Kunststoffscheiben mit Aluminiumoxid Belegung, extra dünn

**EN** Flexible plastic discs with aluminium oxide coating, extra thin

**FR** Disques flexibles en plastique avec revêtement en oxyde d'aluminium, extra mince

**ES** Discos de plástico flexible con revestimiento de óxido de aluminio, extra fina



Einseitig / Single sided / Monoface / Unilateral

Stck. / Pcs / Pièces / Uds.	Ø 14 mm	25 + 25 + 25 + 25 = 100
Artikel / Item Article / Articulo	<b>FDW371-MIX140</b> (FDW371 140 + FDW371C140 + FDW371F140 + FDW371U140)	

opt. RPM: 7.000-10.000

1	<b>W421</b> Snap-on Mandrel / Mandrel / Mandrin / Mandril
---	---

**HOFLEX®**

unmontiert • unmounted • non monté • no montado

**Einseitig**  
Single sided  
Monoface  
Unilateral



Stck. / Pcs / Pièces / Uds.	100	100	100	100
Artikel / Item Article / Articulo	<input checked="" type="radio"/> <b>FDW371 140</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>FDW371C140</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>FDW371F140</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>FDW371U140</b>
Durchmesser / Diameter Diamètre / Diámetro	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Stärke / Thickness Épaisseur / Espesor	0,21 mm	0,17 mm	0,14 mm	0,11 mm

- Formgebung / shaping former / formar
- Glätten / smoothing lissage / suavizar
- Polieren/ polishing polissage / lustrado
- Hochglanz / high-shine plus brillant / brillante

Stck. / Pcs / Pièces / Uds.	5 / Pack
Artikel / Item / Article / Articulo	<b>5W 421</b>
Mandrelle Snap-on Mandrels Mandrins Mandriels	 W = RA = CA 2,35 mm

ISO 204

**100 Stück pro Sorte**  
100 pieces per variety  
100 pièces par variété  
100 unidades por variedad

## KIT SOFT Dr. Harald Steinbrenner

für Kronen • for crowns • pour couronnes • para coronas




AuFG 141 010



FG 140C010



FG 277X023

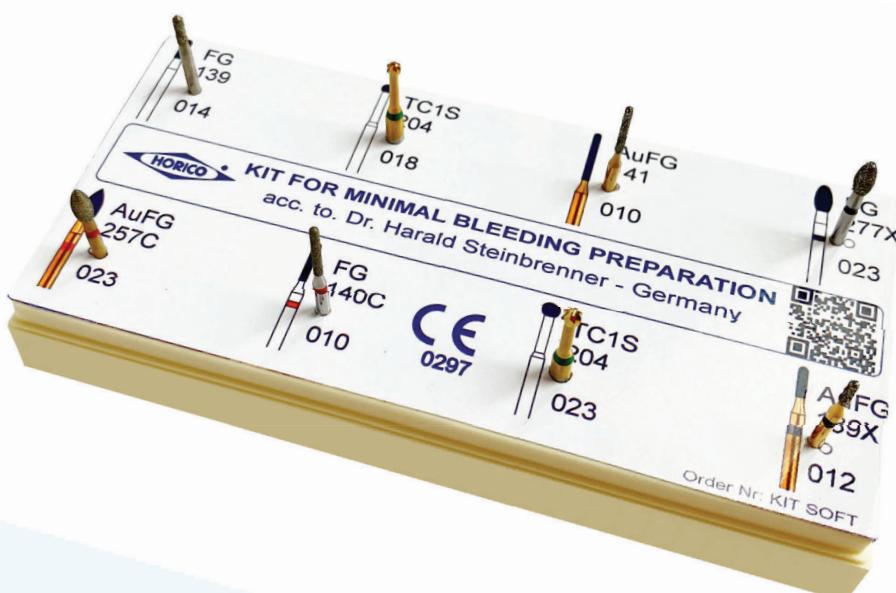

**SCAN ME**

(Video)

**DE** Bye-bye Blutung! Dieses Kit spart Zeit, da selbst im Falle einer subgingivalen Stufenpräparation kaum ein Bluten ausgelöst wird. Der zylindrische Diamantschleifer (AuFG141 010) hat die gleiche Breite wie die Stufe, die angelegt wird. Dadurch ist eine subgingivale Präparation möglich, ohne dass die Gingiva dadurch berührt wird.  
**Die Vorteile:** sehr schonende Technik, weniger Aufwand beim Blutungsmanagement, Zeitsparnis.

**EN** Bye-bye bleeding! This kit saves time because even in the case of a subgingival step preparation, hardly any bleeding is triggered. The cylindrical diamond bur (AuFG141 010) has the same width as the step that is created. This makes subgingival preparation possible without touching the gingiva.  
**The advantages:** very gentle technique, less effort in bleeding management, time saving.

**FR** Bye-bye le saignement ! Ce kit permet de gagner du temps car même dans le cas d'une préparation par étapes subgingivales, pratiquement aucun saignement n'est déclenché. La fraise diamantée cylindrique (AuFG141 010) a la même largeur que le pas qui est créé. Cela permet une préparation subgingivale sans toucher la gingive.  
**Les avantages:** technique très douce, moins d'efforts dans la gestion des saignements, gain de temps.

**ES** ¡Adiós al sangrado! Este kit ahorra tiempo, ya que incluso en el caso de una preparación de un escalón subgingival apenas se produce sangrado. La fresa de diamante cilíndrica (AuFG141 010) tiene la misma anchura que el escalón que se crea. Esto hace posible la preparación subgingival sin tocar la gingiva.  
**Las ventajas:** técnica muy suave, menor esfuerzo en la gestión del sangrado, ahorro de tiempo.

## KFO - KIT FÜR METALL (KIT KFOM)

for metals • pour metaux • para metales

Kieferorthopädie • Orthodontics • Orthodontie • Ortodoncia

*ZTM Sven Milpauer*



## DE

- **S194NE 040** zur Bearbeitung von NEM / Modellguss
- **S194NEF 040** zur feinen Nacharbeit von Metallen
- **H9642** zur Vorpolitur
- **H9862** zur Hochglanzpolitur

## EN

- **S194NE 040** for machining non-precious metals / model casting
- **S194NEF 040** for fine finishing of metals
- **H9642** for pre-polishing
- **H9862** for high gloss polishing

## FR

- **S194NE 040** pour l'usinage de métaux non précieux
- **S194NEF 040** pour une finition fine des métaux
- **H9642** pour le prépolissage
- **H9862** pour le polissage haute brillance

## ES

- **S194NE 040** para el acabado de metales no preciosos
- **S194NEF 040** para acabado fino de metales
- **H9642** para prepulido
- **H9862** para pulido de alto brillo

## KFO - KIT FÜR KUNSTSTOFF (KIT KFOK)

for plastics • pour plastique • para plásticos

Kieferorthopädie • Orthodontics • Orthodontie • Ortodoncia

*ZTM Sven Milpauer*



DE

- **S274KX 060** für thermoplastische Kunststoffe und Schienenmaterialien
- **S194KX 040** für thermoplastische Kunststoffe und Schienenmaterialien
- **S274134 060** für Kunststoffe und Metalle
- **H 358G220** für alle KFO-Kunststoffsysteme
- **H 9642** zur Vorpolitur
- **H 9862** zur Hochglanzpolitur

FR

- **S274KX 060** pour les thermoplastiques et les matériaux pour attelles.
- **S194KX 040** pour les thermoplastiques et les matériaux pour attelles
- **S274134 060** pour plastiques et métaux
- **H 358G220** pour tous les systèmes orthodontiques en plastique
- **H 9642** pour le pré-polissage
- **H 9862** pour le polissage haute brillance

EN

- **S274KX 060** for thermoplastics and splint material
- **S194KX 040** for thermoplastics and splint material
- **S274134 060** for plastics and metals
- **H 358G220** for all orthodontic plastic systems
- **H 9642** for pre-polishing
- **H 9862** for high gloss polishing


ES

- **S274KX 060** para termoplásticos y material de carril
- **S194KX 040** para termoplásticos y material de carril
- **S274134 060** para plásticos y metales
- **H 358G220** para todos los sistemas ortodónticos de plástico
- **H 9642** para prepulido
- **H 9862** para pulido de alto brillo

## LABOR-STICHFRÄSER

Laboratory cutters for bite splints • Fraise pour matériau des attelles

Fresa para material de carril

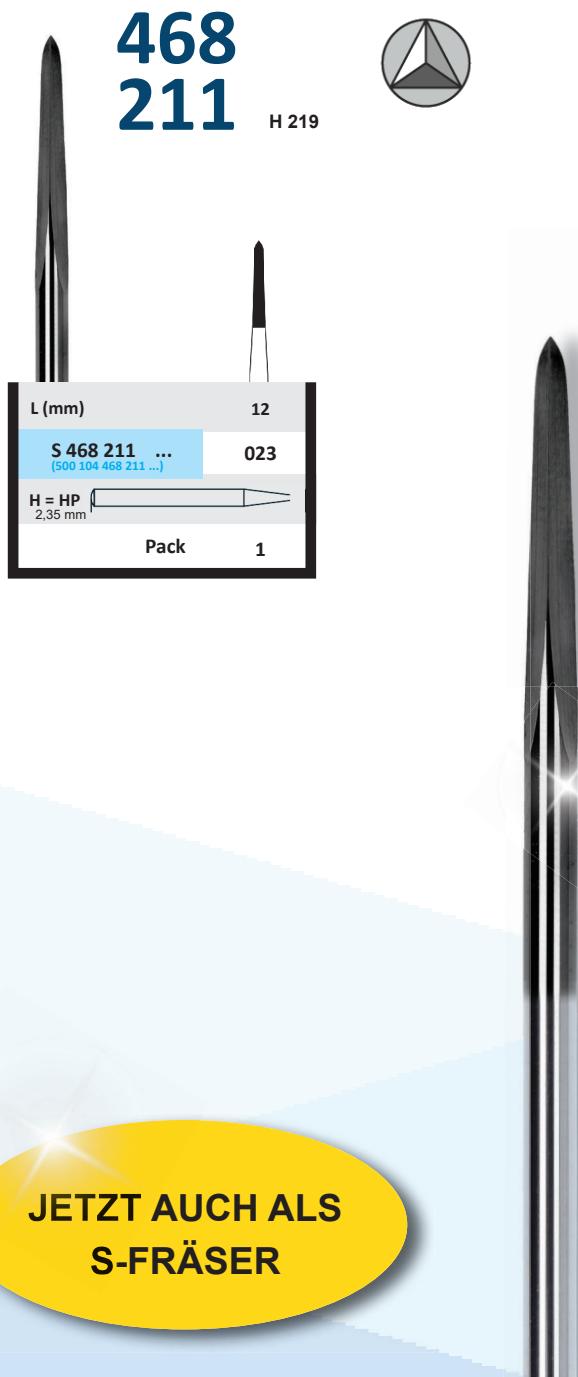

JETZT AUCH ALS  
S-FRÄSER

**DE** Mit diesem Dreikant-Fräser lässt sich Schienenmaterial ganz einfach schneiden.  
**Wozu eine Beschichtung?**

- Die schwarze HORICO-Beschichtung macht die Oberfläche der Fräser noch glatter und reduziert so den Reibwiderstand.
- Dadurch entsteht weniger Hitze beim Arbeiten, der Kunststoff schmilzt nicht so schnell und die Schneiden bleiben schön frei.
- Zudem schützt die Beschichtung (3.300 VH) die Schneiden vor Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Fräzers.

**EN** This triangular cutter makes it very easy to cut splint material.

**Why a coating? Advantages:**

- The black HORICO coating makes the surface of the cutters even smoother and thus reduces frictional resistance.
- As a result, less heat is generated when working, the plastic does not melt so quickly and the blades remain nice and clear.
- In addition, the coating (3,300 VH) protects the blades from wear and increases the life of the cutter.

**FR** Cette fraise triangulaire permet de couper facilement le matériau des attelles.

**Pourquoi un revêtement ? Les avantages sont nombreux :**

- Le revêtement noir HORICO rend la surface des fraises encore plus lisse et réduit ainsi la résistance au frottement.
- Il en résulte moins de chaleur lors du travail, le plastique fond moins vite et les lames restent bien dégagées.
- De plus, le revêtement (3.300 VH) protège les arêtes de coupe contre l'usure et augmente la durée de vie de la fraise.

**ES** Esta fresa triangular facilita enormemente el corte de material de carril.

**Por qué un revestimiento? Ventajas:**

- El recubrimiento negro HORICO hace que la superficie de las fresas sea aún más lisa y reduce así la resistencia a la fricción.
- Como resultado, se genera menos calor al trabajar, el plástico no se funde tan rápidamente y los bordes de corte permanecen limpios y nítidos.
- Además, el recubrimiento (3.300 VH) protege los filos de corte del desgaste y aumenta la vida útil de la fresa.

## CAD-CAM-FRÄSER

CAD-CAM Cutters • Fraises CAD-CAM • Fresas CAD-CAM

### ROLAND® CAD-CAM-System

Material	Abbildung/Illustration	Bestellnr./ Order Nr.	D1	D2	L1	kompatibel mit compatible with
Zirkon Zirconia Zircone Circonio	 <b>Diamantbeschichtung</b> Diamond coating Revêtement diamanté Recubrimiento de diamante	<b>XDC R4006</b> 	0,6	4	50	Roland®
	 <b>Diamantbeschichtung</b> Diamond coating Revêtement diamanté Recubrimiento de diamante	<b>XDC R4010</b> 	1	4	50	Roland®
	 <b>Diamantbeschichtung</b> Diamond coating Revêtement diamanté Recubrimiento de diamante	<b>XDC R4020</b> 	2	4	50	Roland®
<b>NEW</b>	 <b>Schwarz beschichtet</b> Black coated Revêtement noir Recubrimiento negro	<b>XSC R4010T</b> (Torus Abutment)	1	4	50	Roland®
<b>NEW</b>	 <b>Schwarz beschichtet</b> Black coated Revêtement noir Recubrimiento negro	<b>XSC R4020T</b> (Torus Abutment)	2	4	50	Roland®



## CAD-CAM-FRÄSER


CAD-CAM Cutters • Fraises CAD-CAM • Fresas CAD-CAM

### WIELAND® CAD-CAM-System

Material	Abbildung/Illustration	Bestellnr./ Order Nr.	D1	D2	D3	kompatibel mit compatible with
Zirkon Zirconia Zircone Circonio		XSC W3010 35R	1	3	35	Wieland®
		XDC W3010 35R	1	3	35	Wieland®
		XSC W3025 35R	2,5	3	35	Wieland®
		XDC W3025 35R	2,5	3	35	Wieland®
PMMA  <span style="color: red;">NEW</span>		XNP W3010 35R/1 Einschneider - single blade	1	3	35	Wieland®
		XNP W3025 35R/1 Einschneider - single blade	2,5	3	35	Wieland®

### IMES ICORE® CAD-CAM-System

Material	Abbildung/Illustration	Bestellnr./ Order Nr.	D1	D2	L1	kompatibel mit compatible with
CoCr  <span style="color: red;">NEW</span>		XRM I6030T 45R/4 Vierschneider - 4 blades Torus (Abutment)	3	6	45	Imes Icore®

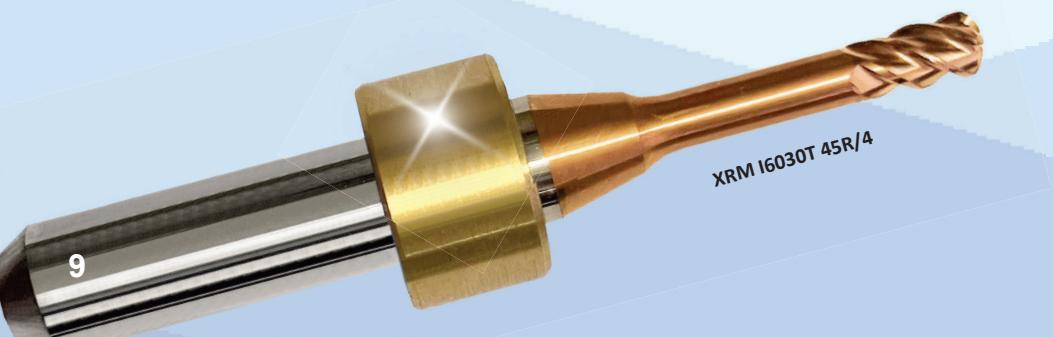

**Notizen**

**Notes**

**Remarques**

**Notas**



This section contains a large area for notes, consisting of a grid of horizontal dotted lines within a dashed border. At the bottom left, there is a small rectangular box containing social media links. The background of this entire section is a light blue gradient with a subtle diamond pattern.

Besuchen Sie uns auch unter:

Visit us also at:

Rendez-nous également visite sur:

Visitenos también en:





Ganz genau.

2023

HOPF, RINGLEB & CO. GMBH & CIE.  
Gardeschützenweg 82 - 12203 Berlin - Germany  
Telefon: +49(0)30 830 00 30 - E-Mail: [info@horico.de](mailto:info@horico.de) - Internet: [www.horico.de](http://www.horico.de)